

کاتالوگ محصولات استومی هالیستر


Hollister Ostomy
Catalogue



Rayan Teb Javid

نماينده انحصارى شركت هالیستر در ايران



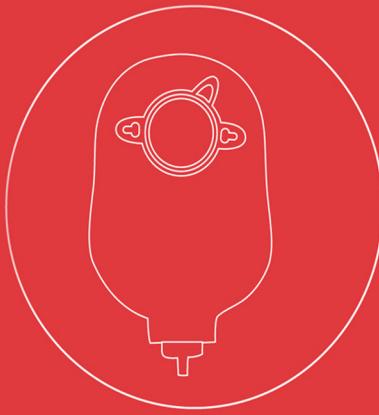

درباره هالیستر

امروزه شرکت هالیستر به عنوان یک کمپانی جهانی مستقل با سابقه طولانی بیش از ۹۰ سال در امر توسعه ساخت و مدیریت و بازاریابی محصولات زخم، استومی و بی اختیاری در بیش از ۶ قاره دنیا گسترش یافته و خدمات خود را توسط یک تیم جهانی به بیماران ارائه می نماید.

ماموریت ما :
کمک به ارتقاء کیفیت سطح زندگی در بیمارانی که از محصولات هالیستر استفاده مینمایند.

اولین کیسه استومی شرکت هالیستر در سال ۱۹۶۴ تولید گردیده است. از آن زمان تا کنون محصولات شرکت هالیستر در طراحی کیسه استومی، تکنولوژی چسب های پایه و نوع فیلتر تخصصی آن همیشه به عنوان پیشرو مطرح بوده و در خط مقدم محصولات استومی در سرتاسر جهان شناخته شده میباشد.

اهداف ما:
فراتر از ارائه محصولات بوده و شامل ارائه حمایت های علمی، آموزشی و کاربردی از طریق کارشناسان و متخصصین زخم و استومی، انتشار مجله های پزشکی مرتبط و منابع علمی آنلاین برای خدمت به افرادی که با محصولات استومی ما در ارتباط هستند میباشد.

اهداف اساسی و پایه ای هالیستر:
تهیه محصولات و خدمات با کیفیت بالا و پیشرفته در جهت کمک به بیمارانی است که در تلاش هستند تا پس از عمل جراحی از نظر جسمی و روحی به زندگی عادی خود بازگردند.



در هالیستر:

ما به ضرورت و اهمیت انتخاب یک سیستم استومی مناسب برای شما آگاه میباشیم. شرکت هالیستر با ارائه طیف وسیعی از محصولات مخصوص استومی، شما را در انتخاب دقیق نوع کیسه، چسب پایه مناسب و لوازم جانبی با توجه به نیازهای استومی منحصربه فردتان یاری می نماید.

چه ویژگی هایی در سیستم استومی برای شما حائز اهمیت می باشد؟

آیا شما به سیستم یک تکه استومی نیاز دارید؟

به محصولات یک تکه هالیستر با نام مدرمافلکس (ModermaFlex) در صفحه ۲ مراجعه کنید.

آیا شما به سیستم دو تکه استومی نیاز دارید؟

به محصولات دو تکه هالیستر با نام کانفورم ۲ (Conform 2) در صفحه ۴ مراجعه نمایید.

آیا به یک کیسه قابل تخلیه یا ته باز نیاز دارید؟

جهت کسب اطلاعات کامل در مورد سیستم تخلیه چسبدار رولی شکل موجود در کیسه های ته باز یا قابل تخلیه به صفحه ۶ مراجعه کنید.

آیا شما به کیسه ای که دارای ویژگی حفاظت از انتشار بو و پیشگیری از باد کردن در اثر تجمع گازهای رووده می باشد نیاز دارید؟

جهت اطلاعات بیشتر از مزایای کیسه های هالیستر که دارای سیستم فیلتر پیشرفته (AF300) میباشند به صفحه ۸ مراجعه کنید.

**آیا پوست شما حساس و شکننده می باشد؟
یا دارای مشکلات مربوط به بی کفایتی سیستم تخلیه در کیسه های ته باز می باشد؟**

جهت مشاهده طیف متنوع و کامل چسب های پایه قابل دسترس هالیستر به صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

آیا شما در تطبیق سایز و شکل استومی با چسب پایه خود مشکل دارید؟



به مجموعه جدید حلقه های محافظ اداپت (Adapt) و لوازم جانبی مخصوص استومی Hollister در صفحه ۱۱ مراجعه نمایید.

برای داشتن اطلاعات بیشتر در زمینه کدهای محصولات هالیستر (سیستم یک تکه، دو تکه و لوازم جانبی) به صفحه ۱۴ مراجعه فرمایید.



Moderma Flex

One-Piece Ostomy System

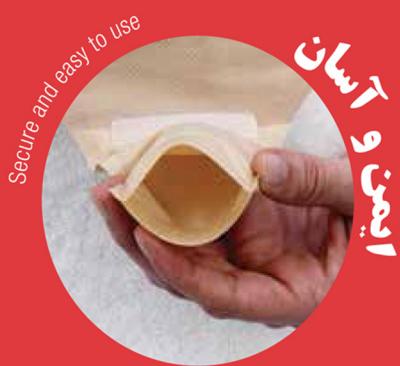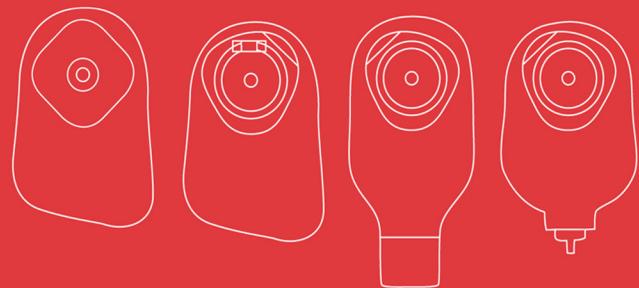

سیستم یک تکه هالیستر
مدرمافلکس

کیسه های هالیستر قابل ارتجاع و مطمئن

آیا کیسه های سبک با قدرت حفاظت بالا در برابر نشت ترشحات ناخواسته مورد نظر شما می باشد؟

طیف کامل کیسه های یک تکه مدرمافلکس هالیستر قابل ارتجاع، ایمن و مناسب بوده و منطبق با هرنوع استومی طراحی شده اند. کیسه های یک تکه مدرمافلکس دارای یک لایه چسب حصیری یکپارچه در اطراف چسب پایه بوده که باعث بیشتر شدن سطح ایمنی و اطمینان در چسب در برابر نشت ترشحات از استومی می گردد.



کیسه های یک تکه مدرمافلکس

قابل دسترس در دو رنگ شفاف و مات.
دارای چسب پایه قابل برش کانوکس و مسطح.

کیسه های ته بسته

این نوع کیسه غیر قابل تخلیه می باشد و انتهای کیسه کاملا بسته بوده و توسط فیلتر مخصوص (AF³⁰⁰) که در کیسه های هالیستر تعییه شده است از تجمع و نشت گاز پیشگیری می کند.

کیسه های قابل تخلیه (ته باز)

سیستم تخلیه چسبدار منحصر بفرد رولی شکل سه لایه در کیسه ته باز هالیستر حداکثر ایمنی، اعتماد و راحتی را برای شما ایجاد می نماید.

کیسه های یورستومی

شیر تخلیه ویژه و منحصر به فرد موجود روی کیسه های یورستومی سیستم تخلیه ای آسان و قابل اطمینان برای بیماران فراهم مینماید.

سهولت در استفاده

- * سیستم یک تکه در چند مرحله ساده قابل اجرا می باشد شامل آماده کردن چسب پایه، خالی کردن کیسه و تعویض آن.
- * سیستم تخلیه چسبدار سه لایه رولی شکل، در تمام کیسه های قابل تخلیه (ته باز) هالیستر موجود می باشد.
- * کیسه های یورستومی هالیستر دارای شیر تخلیه و رابط منحصر بفرد می باشند.

راحت و قابل اطمینان

- * کیسه های هالیستر شامل یک لایه non woven (بافت نشده) در قسمتی از کیسه که با بدن بیمار در تماس است میباشد که این لایه حداکثر لطافت و نرمی را حین استفاده فراهم می نماید.
- * فیلتر مخصوص و هوشمند AF³⁰⁰ در تمام کیسه های ته بسته و ته باز هالیستر تعییه شده است.

ایمنی و امنیت

- * چسب های کانوکس (محدب) سیستم مدرمافلکس دارای کانوکسیتی یکپارچه در سرتاسر چسب می باشد که این ویژگی بالاترین میزان ایمنی و اطمینان را برای بیمار ایجاد می نماید.

انتخاب انواع چسب های پایه


- * چسب پایه سافت فلکس برای حفاظت پوست های حساس و تعویض روزانه، انتخاب مناسبی می باشد.
- * چسب پایه فلکس ور دارای قدرت چسبندگی و قابلیت انعطاف و ارتجاعی بالاتری می باشد.
- * چسب فلکسند جهت ارتقاء اطمینان و پیشگیری از نشت ترشحات بویژه مناسب برای ترشحات رقیق بدليل اینکه از قدرت چسبندگی بالایی برخوردار می باشند.

**MODERMAFLEX
One-Piece Ostomy System**

Conform 2

Two-Piece Ostomy System

کانفورم ۲
سیستم دو تکه هالیستر

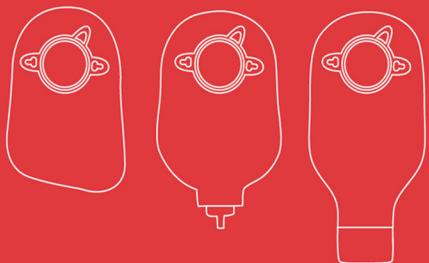

سیستم اتصال کیسه به چسب (دارای قفل مرکزی)



قابلیت ارتجاعی بالا



سهولت در استفاده و تمیز کردن آن



کانفورم ۲ سیستم استومی دو تکه هالیستر قابل ارجاع و مطمئن

سیستم استومی دو تکه کانفورم ۲ سبک زندگی متنوعی را به شما ارائه می نماید و به شما این امکان را می دهد تا با توجه به میزان فعالیت، تعداد دفعات تعویض و یا مقدار یا نوع ترشحات دفعی از استوما، نوع کیسه استومی خود را تغییر دهید.

کیسه دو تکه ته بسته
کانفورم ۲



چسب پایه بدون چسب حصاری
کانفورم ۲



چسب پایه دارای چسب حصاری
کانفورم ۲



سیستم استومی دو تکه هالیستر طیف منحصر بفردی از چسب های پایه و کیسه های استومی را معرفی می نماید که متناسب با انواع استومی ها می باشد.
تمام کیسه های استومی هالیستر دارای تنوع رنگ (مات و شفاف) بوده و در جهت راحتی حین مصرف دارای لایه نرم و محافظ در قسمتی از کیسه که با پوست بدن بیمار در ارتباط است، می باشند.

سهولت در استفاده از کیسه های دو تکه هالیستر

- * دارای حلقه انعطاف پذیر (فلنج)
- * دارای لایه محافظ قابل شستشو.
- * سیستم تخلیه رولی شکل چسبدار سه لایه در کیسه های Lock 'n Roll microseal Closure قابل تخلیه هالیستر
- * دریچه شیردار منحصر بفرد کیسه های دو تکه یورستومی.

کیسه دو تکه ته بسته

کیسه غیر قابل تخلیه یا ته بسته هالیستر دارای فیلتر مخصوص AF³⁰⁰ می باشد که از تجمع گازهای روده در داخل کیسه (باد شدن کیسه) Ballooning پیشگیری می نماید.

کیسه دو تکه قابل تخلیه

کیسه های دو تکه ته باز مدل رولی سه لایه چسبدار سطح اعتماد، اطمینان و راحتی بسیار زیادی را برای بیمار ایجاد می نماید.

کیسه دو تکه یورستومی

کیسه یورستومی شیردار هالیستر دارای سیستم تخلیه مطمئن و آسان بوده و اطمینان و راحتی را برای بیمار تضمین می نماید.

راحتی و اطمینان

- * چسب های پایه قابل بشد با یا بدون چسب حصاری، دارای حلقه انعطاف پذیر (فلنج).
- * فیلتر AF³⁰⁰ بروی تمام کیسه های قابل تخلیه و ته بسته هالیستر.
- * قابل ارجاع و سبک.

ایمنی

- * سیستم قفل مرکزی موجود در سیستم دو تکه هالیستر به گونه ای طراحی شده است که حداقل اطمینان را در برابر جداشدن ناگهانی چسب از کیسه برای بیمار فراهم می نماید.

انتخاب چسب پایه

- * چسب پایه سافت فلکس در تعویض های مکرر برای پوست های حساس مورد استفاده قرار می گیرد.
- * چسب پایه فلکس ور جهت دوام، ماندگاری بیشتر و انعطاف پذیری بالا طراحی شده است.

Lock 'n Roll

Microseal Closure

مرحله اول



باز کردن چسب تخلیه

به آسانی میتوانید لایه های چسب رولی شکل را باز کنید. سیستم تخلیه چسب سه لایه رولی شکل پس از باز شدن به ترشحات اجازه می دهد به آرامی و بطور کامل تخلیه گرددند.

مرحله دوم



تخلیه کردن ترشحات

چسب سه لایه رولی شکل دارای خاصیت ارجاعی و مقاومی است که سرعت خروج ناگهانی ترشحات را کاملا کنترل نموده و از خروج ناگهانی ترشحات بلافضله پس از باز شدن چسب جلوگیری مینماید.

مرحله سوم



تمیز کردن سیستم تخلیه

پس از تخلیه کامل ترشحات، انتهای کیسه را به آرامی باز نمایید و با یک دستمال مرطوب داخل چسب سه لایه را به آسانی تمیز نمایید.

مرحله چهارم



بستن سیستم تخلیه

برای بستن چسب سه لایه رولی، به راحتی لایه ها را بسمت بالا تابزینید بطوریکه چسبهای موجود در لایه ها کاملا رو بروی هم قرار گیرند. پس از روی هم قرار گرفتن چسب رول ها، آنها را کمی فشار داده تا بروزهای میکروسکوپی موجود در چسب ها اتصال ایمن و مطمئنی را ایجاد نمایند.

سیستم تخلیه ایمن و آسان در کیسه های ته باز هالیستر

آیا ایمنی و راحتی کیسه برای شما اهمیت دارد؟

کیسه های ته باز هالیستر دارای یک سیستم تخلیه سه لایه چسبدار رولی شکل می باشند که چسب موجود بروی هر لایه دارای هزاران پرز بسیار ریز میکروسکوپی بوده که در حین تازدن لایه ها، چسب موجود روی هر لایه روبروی همدیگر قرار گرفته و با کمی فشار پرز های میکروسکوپی موجود در چسب ها بداخل هم فشرده می گردند و اتصالی محکم و مقاوم به آب، وزن و یا فشار را ایجاد می نماید.

انتهاي لایه پس از تا خوردن دارای یک لبه مطمئن شفاف رنگ است که بر راحتی زمان تخلیه باز و مجدداً بسته می گردد.



Ⓐ پوشش مقاوم، محکم و ضد آب

- * هزاران پرز ظریف میکروسکوپی جهت ایجاد یک اتصال ایمن و قابل اطمینان در سیستم تخلیه کیسه ته باز رولی شکل هالیستر بکار رفته است.
- * سیستم تخلیه دارای مقاومت زیاد به فشار، وزن و آب می باشد.

کیسه قابل تخلیه
سیستم یک تکه

کیسه قابل تخلیه
سیستم دو تکه

Ⓑ طراحی جدید و تقویت بیشتر لبه شفاف

- * سهولت در باز و بسته شدن این لایه و دور قرار گرفتن این قسمت از مسیر تخلیه ترشحات جهت پیشگیری از آلوده شدن آن با ترشحات بیمار یکی از مزایای سیستم تخلیه کیسه های هالیستر می باشد.




Ⓒ دارای شکل ارگونومیک

- * به منظور ایجاد راحتی و تطبیق با انحنای طبیعی بدن طراحی منحصر بفردی در آن بکار رفته است.
- * پیوستگی مرتب و مسطح لایه ها پس از تا شدن.

AF300 Filter


The Next Generation

کارایی منحصر بفرد
فیلتر AF ۳۰۰ کیسه هالپیستر
نسل جدید

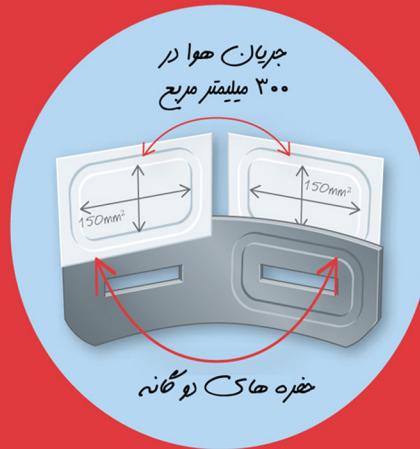

A

بهبود جریان هوای

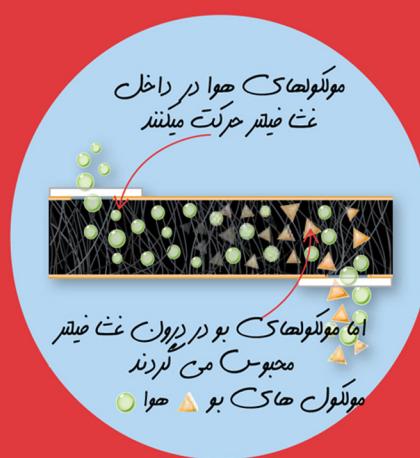

B

حذف کامل انتشار بو




C

حفظ مؤثر در برابر
مایعات

بالانس جریان هوای بر طرف کننده مؤثر بو AF ۳۰۰ توسط فیلتر

آیا به حداقل رسیدن انتشار بو و پیشگیری از باد کردن کیسه از موارد حائز اهمیت در انتخاب کیسه استومی برای شما می باشد؟

فیلتر AF ۳۰۰ هالیستر نسل جدید فیلتر های استومی می باشد که جهت برقراری تعادل بین تصفیه مؤثر بو و بهبود جریان هوای استومی های طراحی شده است.

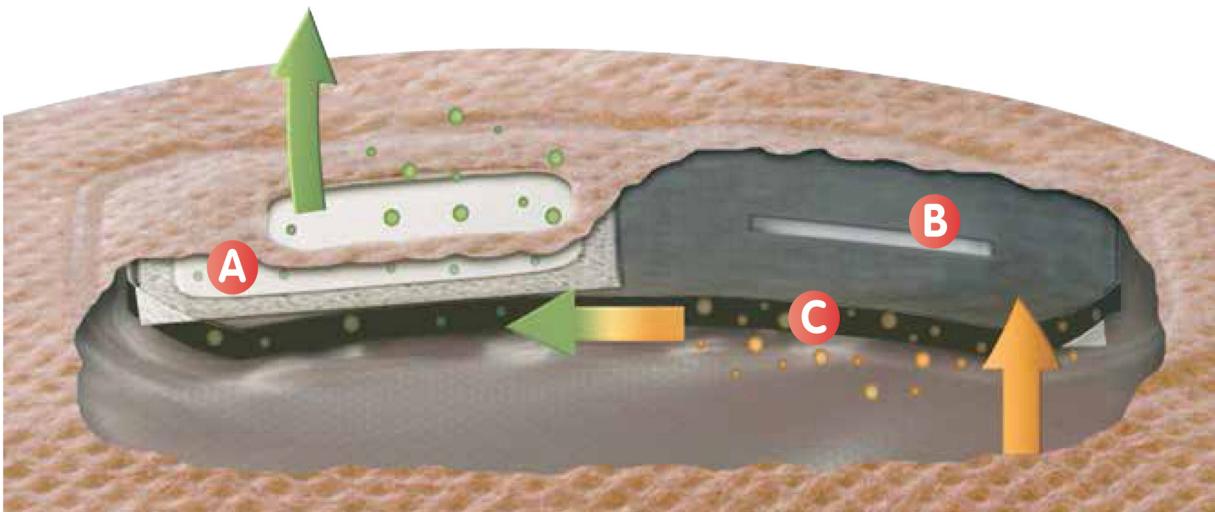

بهبود جریان هوای

غشای فیلتر اختصاصاً جهت بهبود جریان هوای در هر سمت فیلتر طراحی شده است. فیلتر AF ۳۰۰ حدود ۳۰۰ میلیمتر مربع سطح برای جریان هوای ایجاد می کند. افزایش جریان هوای در فیلتر، باد شدن کیسه را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد که این امر باعث آسودگی و راحتی بیشتر بیمار می گردد.

حذف کامل انتشار بو از طریق فیلتر AF ۳۰۰


سمت داخل فیلتر، یک سیستم پیشرفته فیلتراسیون کربن فعال شده، قرار دارد که ظرفیت تصفیه کننده مؤثری را فراهم می نماید و باعث کنترل بو می گردد. این طراحی مبتکرانه در قسمت ورودی و خروجی فیلتر، کمک می کند تا هوای گازهای روده بطور کامل از داخل فیلتراسیون کربن عبور نمایند. با این تفاوت که هوای میان فیلتر براحتی می گذرد ولی مولکولهای گازهای بو دار بطور مؤثری در این فیلتر حبس می گردند زیرا کربن فعال شده موجود در فیلتر اجازه عبور مولکول های بو را نمیدهد. غشا تخصصی فیلتر AF ۳۰۰ کمک می کند تا مولکول های بو و هوای بطور کامل تهویه گرددند و از باد کردن کیسه (Ballooning) و چسبیدن لایه های کیسه از همدیگر در اثر عدم وجود هوای (Pancaking) پیشگیری می نماید.

حفظ مؤثر در برابر مایعات

علاوه بر بهبود جریان هوای غشا فیلتر عنوان یک عایق مقاوم در برابر مایعات در هر دو سمت فیلتر عمل می نماید. مقاومت غشا در برابر نشت، این اطمینان را حاصل می نماید که نه تنها مدفوع جامد یا مایع از فیلتر به خارج از کیسه نشست نکند بلکه کمک میکند تا آب، صابون و یا سایر مایعات نتوانند از سطح بیرونی کیسه از طریق فیلتر بداخل کیسه راه یابند. این عایق ضدآب اجازه می دهد تا فرد دارای استومی بدون نیاز به پوشاندن فیلتر، حمام برود یا در آب شنا کند.



Skin Barriers

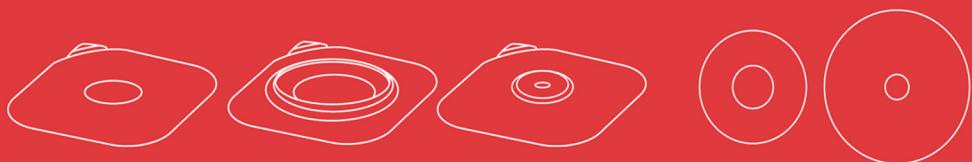

انواع چسب های پایه هالیستر

افزایش سطح اطمینان و راحتی

آیا انتخاب نوع چسب پایه برای شما مهم است؟

انتخاب یک چسب پایه مناسب که بتواند منطبق با نیازهای منحصر بفرد استومی و پوست شما باشد بسیار حائز اهمیت است. یک چسب پایه که برای یک شخص مناسب است، ممکن است برای فردی دیگر مناسب نباشد. بنابراین هالیستر طیف جامع و وسیعی از چسب های پایه را با توجه به نیازهای افراد در اختیارشان قرار میدهد، تا با ارائه راه حلهای ویژه و منحصر بفرد در هر شخص به ارتقاء سطح کیفیت زندگی در بیماران کمک مؤثری کرده باشد.

چسب پایه سافت فلکس



چسب پایه فلکس ور با
با بدون چسب حصیری



چسب پایه فلکستند
با چسب پایه حصیری



چسب پایه فلکستند M



چسب پایه سافت فلکس جهت راحتی و محافظت از پوست

- * این چسب پایه ملایم جهت تعویض روزانه در پوستهای بسیار حساس و شکننده مورد استفاده قرار میگیرد.
- * شکل و ضخامت این چسب به نحوی طراحی شده است که بدون کاهش سطح اطمینان آن، حداکثر میزان ارجاعی بودن را برای بیمار فراهم میدارد.
- * مورد استفاده جهت تعویض های روزانه میباشد.

چسب پایه فلکس ور

- * این چسب با حفظ بالانس بین میزان ماندگاری و نرمی و لطافت چسب با پوست بدن، می تواند در تعویض های مکرر و یا بلندمدت کیسه بدون ایجاد ناراحتی و آزردگی در پوست مورد استفاده قرار گیرد.
- * دارای مقاومت بالا در برابر خوردگی توسط ترشحات و همچنین حفظ شکل ظاهری چسب دربرابر مایعات.
- * مورد استفاده در تعویض های مکرر یا طولانی تر از ۲ روز.

چسب پایه فلکستند جهت حفاظت بیشتر در برابر مایعات

- * ماندگاری بالا با یک مقاومت مناسب در برابر ساییدگی در تعویض های طولانی مدت.
- * چسب پایه فلکستند، زمانیکه در معرض ترشحات مایع یا ادرار قرار می گیرد متورم می شود تا بتواند بین استوما و پوست یک سد ایجاد نماید تا ترشحات روی پوست بیمار نشست پیدا نکند.
- * مورد استفاده در تعویض های نسبتاً طولانی مدت.

چسب پایه فلکستند ام M با فرمولاسیون منحصر بفرد برای ماندگاری طولانی مدت به جهت دارا بودن مزیت های برتر و مقاومت بیشتر در برابر ترشحات

- * این چسب دارای خاصیت چسبندگی و پیوستگی بسیار بالایی بوده که حتی در زمانیکه خیس می گردد بدون اختلال در میزان چسبندگی آن بخوبی روی سطح پوست باقی می ماند.
- * این چسب همانند چسب پایه فلکستند دارای خاصیت ارجاعی و شکل گیری مناسبی روی پوست میباشد و همچنین دارای مزایای بیشتری در سازگاری با PH طبیعی پوست بوده که این امر خود به حفظ انسجام و اسیدیته پوست کمک می نماید.

چسب حصیری برای بالاتر رفتن سطح اطمینان از چسبندگی

- * چسب حصیری هم در چسب های پایه مسطح و هم کانوکس در دسترس می باشد.
- * با قرار گیری و چسبیدن روی پوست، حداکثر اینمی را در برابر ترشحات ایجاد می نماید.
- * با چسبندگی مناسب به پوست از بلند شدن لبه های چسب پایه پیشگیری می نماید.

شیر تخلیه منحصر بفرد کیسه های یورستومی هالیستر

- * این شیر تخلیه براحتی باز و بسته می گردد.
- * بدلیل دارا بودن سایز دریچه مناسب، ادرار داخل کیسه بطور کامل تخلیه می گردد.
- * دارای نشان طلایی رنگ شبیه به قطره روی شیر می باشد که باز بودن جهت شیر تخلیه را نشان می دهد.
- * شیر تخلیه بطور مستقیم به کیسه ادرار متصل میگردد.

قابلیت ارجاعی و افزایش مدت ماندگاری کیسه روی پوست

آیا حلقه محافظی که قابل ارجاع باشد و بتواند زمان ماندگاری کیسه روی پوست را زیاد کند در انتخاب شما حائز اهمیت است؟

حلقه محافظ ادپت (مسطح یا کانوکس) یک جایگزین فاقد الكل مناسب با خمیر استومی می باشد. این حلقه می تواند کش آمده و یا خم شودتا شکل موردنظر شما را ایجاد نماید. نوع محدب یا کانوکس آن جهت ایجاد یک چسبندگی ایمن و مطمئن برای استومی های فرورفته و یا گودی اطراف استومی طراحی شده است.

خمیر نواری محافظ ادپت به منظور کمک به محافظت پوست با پر کردن سطوح ناهموار در زیر چسب پایه مورد استفاده قرار میگیرد تا ضخامت چسب پایه را برای کانوکسیتی عمیق تر تنظیم نماید و شکل موردنظر شما (بیضی یا گرد) را فراهم نماید.

حلقه محافظ ادپت



حلقه محافظ کانوکس (محدب)
ادپت



خمیر نواری محافظ
ادپت



حلقه های محافظ ادپت

- * دارای فرمولاسیون منحصر بفرد با چسب پایه فلکستند M.
- * دارای چسبندگی با ماندگاری زیاد روی پوست بدنه.
- * قابلیت کشیدگی و خم شدگی در حلقه بدون ایجاد ترک خورده.
- * شکل خود را بلافضله پس از فرم دادن آن به شکل دلخواه حفظ می نماید.
- * حفظ خاصیت چسبندگی به پوست.
- * قابلیت نصف شدن، خم شدن و رویهم قرار گرفتن لبه ها در حلقه های محافظ وجود دارد.

* در دو سایز (98mm و 48mm) در دسترس میباشد. با توجه به نظر پرستاران و استومیت ها، شرکت هالیستر حلقه محافظ فلکستند M را طراحی کرده است. این حلقه خاصیت ارجاعی و ماندگاری زیادی را با حفظ خاصیت خم شدگی آن روی پوست ایجاد مینماید.

* محافظت بیشتر پوست.

* ایجاد سطح بالایی از اطمینان و ایمنی برای بیمار.

حلقه های محافظ کانوکس ادپت

- * قابل بریده شدن، خم شدن و کش آمدن می باشند.
- * قابل استفاده با خمیر نواری محافظ ادپت.
- * دارای چسبندگی با ماندگاری زیاد روی پوست بدنه.
- * قابلیت کشیدگی و خم شدگی در حلقه بدون ایجاد ترک خورده یا پوسته شدن یا شکسته شدن آن.
- * شکل خود را بلافضله پس از فرم دادن آن به شکل دلخواه حفظ می نماید.

* به شکل یک چسب پایه ترکیبی، سطحی از مقاومت را در برابر ساییدگی جهت پوست اطراف استوما فراهم می نماید.

خمیر نواری محافظ ادپت

- * قابل استفاده با حلقه محافظ ادپت.
- * قابل بریده شدن به سایز دلخواه.
- * قابلیت انطباق با چین های ناهموار پوست.
- * به شکل یک چسب پایه ترکیبی، سطحی از مقاومت را در برابر ساییدگی پوست اطراف استوما فراهم مینماید.

افزایش عملکرد و راحتی بیشتر با محصولات جانبی استومی هالیستر

راحتی و عملکرد مناسب سیستم استومی برای شما تا چه میزان اهمیت دارد؟

محصولات جانبی استومی هالیستر دارای طیف وسیعی از لوازم جانبی با کیفیت مطلوب و برتر تایید شده میباشند که به منظور افزایش عملکرد و راحتی و همچنین ارتقاء سطح اطمینان و ایمنی سیستم چسب پایه و کیسه استومی شما طراحی شده اند.



خمیر مخصوص استومی ادابت

- * جهت پر کردن سطوح ناهموار پوست اطراف استومی
- * کمک به تناسب بیشتر چسب پایه بروی پوست
- * کمک در کاهش رسک نشت از استوما

دئودورانت لوبریکانت ادابت

- * کمک به برطرف کردن و خنثی کردن بو
- * با خاصیت چرب کنندگی سطح داخلی کیسه به تخلیه راحت و سریع ترشحات کمک می نماید.
- * کاهش ایجاد چسبندگی لایه های کیسه به هم دیگر (**Pancaking**)
- * دارای فرمولاسیون ویژه جهت پیشگیری از بجا گذاشتن رنگ و یا لک روی کیسه.
- * تقریباً ۵ میلی لیتر از محلول دئودورانت لوبریکانت ادابت را بداخل کیسه خود بریزید و کیسه را مالش داده تا کاملاً سطح داخلی کیسه آغشته به محلول لوبریکانت گردد.

خمیر استومی



دئودورانت لوبریکانت ادابت



ست شستشوی روده



اسپری Medical Adhesive Remover



آدرس

بلوار اشرفی اصفهانی، پایین تر از مرزداران
برج نگین رضا طبقه ۱۲ شمالی واحد ۱۲۰۴



تلفن تماس

۰۲۱-۴۴۰۸۲۴۱۷
۰۲۱-۴۴۰۳۰۳۳۹

وب سایت

www.rtjco.net



نماینده انحصاری شرکت هالیستر در ایران

